

Feedback sur une RCP de qualité

- Profondeur de compression
- Taux de compression
- Fraction de compression
- Relâchement complet de la poitrine
- Bon positionnement des mains
- Subluxation de la mâchoire et contrôle de l'inclinaison de la tête
- Volume de ventilation approprié




Formation à la RCP de qualité

CPRLilly PRO +

Le nouveau **mannequin pour une RCP de qualité** permet aux instructeurs et aux prestataires de soins de santé de mesurer, suivre et analyser les performances de la RCP de **10 étudiants au maximum simultanément**.

CPRLilly PRO+ aide les instructeurs à accroître l'efficacité dans leurs cours de RCP en se connectant à la nouvelle **application CPRLilly** sur tablette pour suivre les performances de la RCP et formuler un retour objectif menant à une formation à la RCP de qualité.




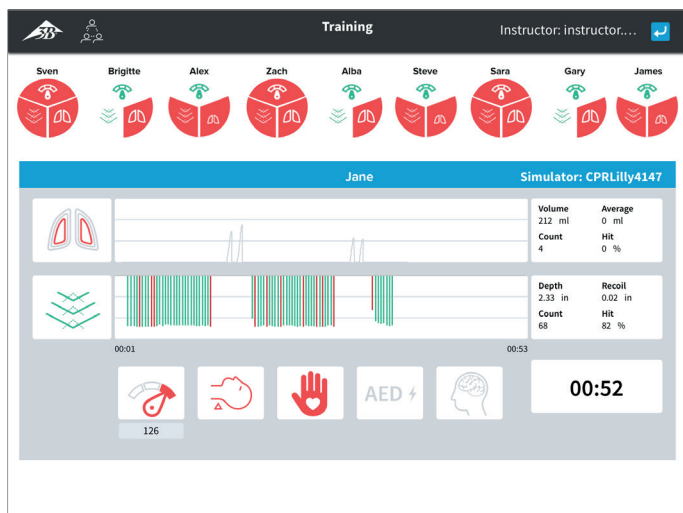

À tout moment, l'instructeur pourra accéder à un affichage détaillé des performances de RCP de chaque étudiant par simple pression

Caractéristiques clés de la formation :

- Feedback sur une RCP de qualité avec historique de débriefing
- Ventilation par bouche-à-bouche et bouche-à-nez
- Ventilation avec masque facial, masque de poche et ballon-masque
- Soulèvement de la poitrine avec ventilation appropriée
- Contrôle d'une désobstruction appropriée des voies aériennes
- Pouls carotidien
- Fonctionnalité de formation au positionnement des tampons de DAE
- Application gratuite disponible sur Google Play et iOS
- Analyse constante des paramètres de RCP de 10 mannequins au maximum simultanément
- Possibilité d'examen individuel en formation de groupe pour une formation plus efficace
- Adaptable à différents concepts de cours
- Affichage simplifié du feedback des étudiants disponible avec l'application CPRLilly

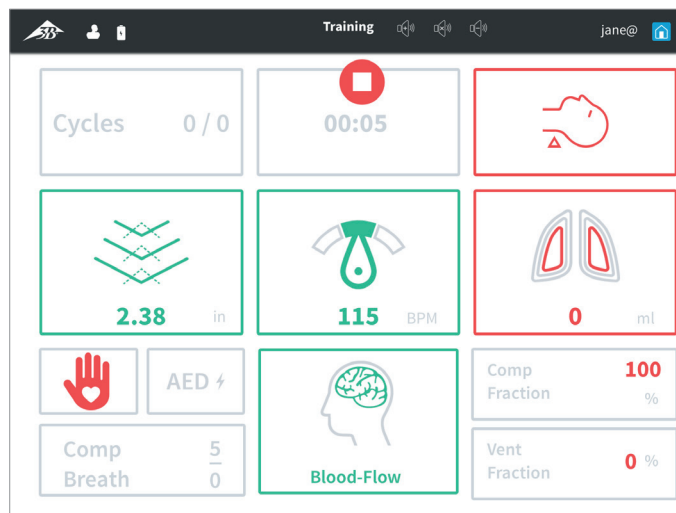

Les étudiants suivront les paramètres de la RCP sur un affichage simplifié du feedback et amélioreront leurs performances en temps réel

Un mannequin solide pour une formation efficace :

- Fabriqué en Allemagne avec un matériel extrêmement durable sans latex
- Les masques faciaux et les sachets pulmonaires peuvent être remplacés facilement sans outil
- Simple à nettoyer grâce à un système de voies aériennes hygiénique
- Fonctionnement silencieux, efficacité énergétique et batterie rechargeable
- Connexion WiFi stable et interface d'application intuitive
- Sac de transport pratique avec tapis d'entraînement pour s'exercer confortablement
- Mannequin à peau foncée disponible

Éléments livrés :

- 1 mannequin de formation CPRLilly PRO+, 1 tablette (selon le modèle), 1 chargeur et une batterie, 4 masques faciaux pour le bas du visage, 25 sachets pour la gorge, 12 adaptateurs de tampon DAE, 1 sac de transport avec tapis d'entraînement

Mettez-vous à niveau dès maintenant et équipez vos salles de cours de mannequins de formation à la RCP avec feedback en direct pour vous conformer aux lignes directrices de l'AHA. CPRLilly PRO+ répond aux exigences d'un feedback direct et d'une RCP de qualité formulées dans les directives de l'AHA :

« Un dispositif de retour direct instrumenté mesure le taux et la profondeur de compression, le positionnement des mains, la fraction de compression de la poitrine et le recul, et offre un feedback audio ou visuel (voire les deux) en temps réel sur ces compétences essentielles de la RCP. »

Mannequin avec tablette 1022071

Mannequin sans tablette 1022237



10/2019

 DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES EN LIGNE À L'ADRESSE 3BSCIENTIFIC.COM



France **3B Scientific S.A.R.L.** • 8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3 • 68870 Bartenheim • France
3bscientific.fr • Phone: 03.89.70.75.20 • Fax: 03.89.70.75.21 • E-mail: commande@3bscientific.com